



CARLO Comfort GP L (Aluminium)

Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,
Umlagern und Transfer von Patienten und Bewohnern

CARLO Comfort GP L

Der flexible Gurtlifter für alle Pflegebereiche ...

Der mobile Gurtlifter CARLO Comfort GP L (Aluminium) gehört zu den qualitativ hochwertigsten und gleichzeitig bedienerfreundlichsten Gurtliftern am Markt ...

Positioniersystem mittels Gasfeder (GPS) und Balancebügel

Das Positioniersystem des CARLO Comfort GP L ermöglicht der Pflegekraft den Bewohner, mit Unterstützung eines Gasfeder-systems, genau zu positionieren und dabei immer im direkten Kontakt zum Bewohner zu stehen. So kann sie sich voll dem Bewohner widmen, ihm ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln und dabei gleichzeitig eine ergonomische Arbeits-haltung beibehalten. Durch das Positioniersystem kann der Bewohner mühelos von einer Sitz- in eine Liegeposition und umge-kehrt geschwenkt werden und optimal im Bett oder über der Toilette positioniert werden. Der Balancebügel kann mittels einer unkomplizierten Arretiervorrichtung sicher in Fahrtrichtung fixiert werden. Durch die Verwendung von 4-Punktgurten mit Sicher-heitsclipsystem werden die sonst üblichen Schwingbewegungen auf ein Minimum reduziert.

Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell

Der CARLO Comfort GP L zeichnet sich durch einen großen Hub-bereich aus, der sowohl eine sehr hohe als auch eine sehr niedrige Stellung ermöglicht. Der Auslegearm mit Balancebügel lässt sich mittels Handbedienteil bis zum Boden abgesenken und gewähr-leistet somit zum Beispiel eine sichere und unkomplizierte Auf-nahme einer gestürzten Person vom Boden. Das Fahrgestell lässt sich elektrisch spreizen und bietet somit einen hohen Bedien-komfort. Aufgrund der geringen Höhe des Fahrgestells können mit dem CARLO Comfort GP L problemlos sowohl Badewannen als auch Pflegebetten unterfahren werden.



Effektive Entlastung

vereint mit höchster Sicherheit und Komfort ...

Das Heben und der Transfer von pflegebedürftigen Menschen, die sich nicht selbst stützen können oder gänzlich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stellt in der täglichen Pflege eine große Herausforderung dar ...

Ergonomisches, gesundheitsschonendes und effektives Arbeiten

Der mobile Gurtlifter CARLO Comfort GP L unterstützt Ihr Pflegepersonal optimal und zuverlässig bei allen täglichen Hebe- und Transferroutinen und ermöglicht jederzeit ein ergonomisches, sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des Bewegungsapparates durch manuelles Heben und Umlagern des Bewohners. Besonders durch das Gasfeder unterstützte Positioniersystem (GPS) und die leichte Aluminiumbauweise des Lifters werden die Arbeitsabläufe nicht nur gesundheitschonender, sondern auch unmittelbar einfacher und bequemer, die Pflegeroutinen können müheloser und effizienter ausgeführt werden und die Arbeitszufriedenheit wird gesteigert.

Universell einsetzbar in allen Pflegebereichen

In Kombination mit der großen Auswahl von verschiedensten, hochwertigen Gurten ist der CARLO Comfort GP L in allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben dem Heben und Umlagern des zu Pflegenden ist der CARLO Comfort GP L auch für den Toilettengang, das Baden oder das Duschen das ideale Hilfsmittel. Er lässt sich problemlos individuell an den pflegebedürftigen Menschen anpassen, unabhängig von dessen Körpergröße, Körpergewicht, Altersgruppe oder körperlicher Einschränkung und bietet dem Bewohner und Patienten dadurch jederzeit die richtige Unterstützung, höchste Sicherheit und ein Maximum an Komfort.



Bequemer und sicherer Transfer, inklusive Fixierung der Biegelposition in Fahrtrichtung. Eine optimale Beinfreiheit ist jederzeit gewährleistet.



Universell einsetzbar für alle Pflegeroutinen, wie zum Beispiel das Baden und Duschen oder der Transfer von und zur Toilette.

(Diese Abbildung zeigt den Gurtlifter in der elektrischen Ausführung)

Der CARLO Comfort GP L (Alu) erlaubt die sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch eine einzelne Pflegekraft ...

Heben und Transfer durch eine einzelne Pflegekraft

Der CARLO Comfort GP L erlaubt es einer einzelnen Pflegekraft die anspruchsvollen Aufgaben des Hebens und Transfers sicher und bequem allein durchzuführen. Besonders in Notfällen, wie der Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden, bietet dies sowohl der Pflegekraft als auch dem Bewohner mehr Sicherheit und effiziente Hilfe. Denn gerade beim Versuch einen Patienten allein hochzuheben, ohne über die notwendige Unterstützung durch einen Lift zu verfügen, kann dieser erneut stürzen und sich dann verletzen.

Höchste Sicherheit und Komfort für den Bewohner

Der neue BEKA Gurtlifter CARLO Comfort GP L erfüllt die höchsten Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Komfort. Alle Funktionen werden elektrisch über ein Handbedienteil gesteuert. Dies ermöglicht der Pflegekraft im ständigen Kontakt mit dem Bewohner zu bleiben und ihn so zu beruhigen und zu unterstützen. Der Bewohner kann sanft und sicher gehoben werden und korrekt, ohne Kraftaufwand, positioniert werden. Durch die stabile Aufhängung, mit der zusätzlich Möglichkeit der Arretierung des Gurtbügels in Fahrtrichtung, werden Pendel-, Schwing- und Hebebewegungen verhindert dies vermittelt dem Bewohner ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit.



Die optimale Lösung


Für Ihre Pflegekraft und Ihre Bewohner ...

Vorteile für Ihre Pflegekräfte

- Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100% Aluminium, 100% recyclebar
- Extra wendig und leicht zu fahren
- Universell einsetzbar auch zum Duschen und Baden
- Positioniersystem mittels Gasfeder (GPS) zum präzisen Positionieren des Bewohners ohne zusätzlichen Kraftaufwand
- Ständiger direkter Kontakt zum Bewohner, da alle Funktionen elektrisch über das Handbedienteil gesteuert werden
- Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein manuelles Heben erforderlich ist
- Handbedienteil mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus, Fehlerdiagnose und Service
- Alle Aufgaben des Hebens und Transfers können in der Regel von einer einzelnen Pflegekraft allein ausgeführt werden

Vorteile für Ihre Bewohner

- Keine verunsichernden Pendel- oder Schwingbewegungen, während des Hebens oder Transfers
- Optimaler Komfort. Die Verstellung des Balancebügels mittels Gasfeder ermöglicht dem Bewohner eine liegende Position einzunehmen und bewirkt somit eine spürbare Druckentlastung der Beine
- Bestmögliche Wahrung der Würde des Bewohners, da die täglichen Pflegeroutinen von einer einzelnen Pflegekraft ausgeführt werden können und kein Team von Pflegekräften erforderlich ist
- Alle täglichen Pflegeroutinen, insbesondere sicheres Duschen können mit Hilfe des CARLO Comfort GP L bequem ausgeführt werden
- Der Bewohner erhält das wichtige Gefühl der Sicherheit, da ein ständiger enger Kontakt zur Pflegekraft besteht
- Große Auswahl an Komfort-Gurten in unterschiedlichen Größen für individuelle Anforderungen

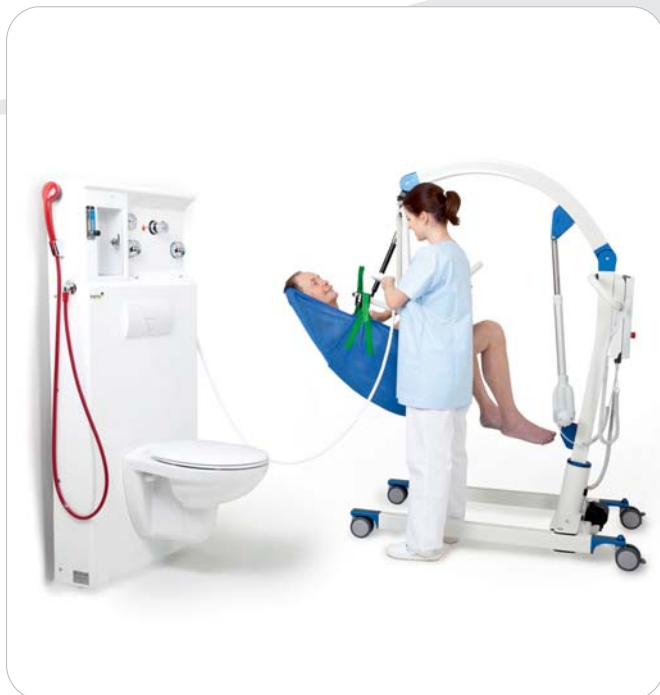

Der CARLO Comfort GP L ist in Kombination mit einem Badegurt natürlich auch zum bequemen Duschen Ihrer Bewohner geeignet.



Sicherer und bequemer Transfer vom Bett mit optimaler Gewichtsverteilung zur Druckentlastung durch Balance-Bügel.

Leistungsmerkmale CARLO Comfort GP L

Ihre Vorteile für sichere und bequeme Transfers ...

Positioniersystem mittels Gasfeder (GPS), für die Dusche geeignet, leichte, stabile Bauweise, Fahrgestell, Hubsäule, Auslegearm und Aufnahmerahmen aus 100% Aluminium, Kombiadapter zur Aufnahme von unterschiedlichen Bügeln, ergonomische Handgriffe für einfaches Manövrieren, 4-Punktgurte mit Sicherheitsclipsystem, inkl. Wandladegerät ...



1 Handbedienung mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus, Fehlerdiagnose, Service.



2 4 hochwertige Doppellenkrollen, 2 davon bremsbar, leicht fahrbar.



3 Elektrische Höhenverstellung mit Absenkung des Gurtbügels bis zum Boden sowie manuelles Notablaßsystem.



4 Elektrisch spreizbares Fahrgestell, geringe Höhe zum einfachen Unterfahren von Badewannen und Pflegebetten.







5 Das Positioniersystem (GPS) ermöglicht der Pflegekraft, mit Unterstützung eines Gasfedersystems, den Bewohner genau zu positionieren und dabei immer im direkten Kontakt zum Bewohner zu stehen.



6 **Optional:** Digitalwaage mit der der Bewohner auch während des Transfers gewogen werden kann.



7 Arretiervorrichtung zur Fixierung des Balance-Bügels in Fahrtrichtung.

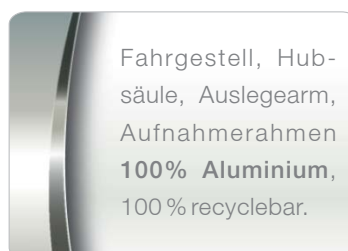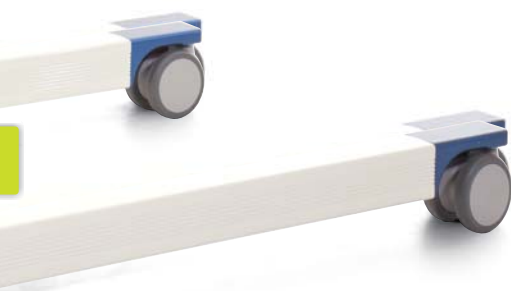

8 30% leichtere Bauweise durch die Verwendung von Aluminium.



9 4-Punktgurte mit Sicherheitsclipsystem in unterschiedlichen Größen.

Technische Daten

Max. Patientengewicht	185 kg
Verstellung und Fixierung des Balancebügels	mittels Gasfeder (GPS)
Fahrgestell (Länge x Höhe)	1.290 mm / 120 mm
Breite innen (geschlossen/gespreizt)	580 mm / 1.040 mm
Breite außen (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.140 mm
Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)	700 mm
Hubbereich	1.400 mm
Antrieb	24 V LINAK Antrieb
Schutzart	IP X4

Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage
Transfurgurte mit Sicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Badegurte mit Sicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)
Toilettengurte mit Sicherheitsclipsystem (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen M-XL)
Ersatzakku 24 V
Wandladegerät

REHATRONIK
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6
 A-3352 St. Peter/Au
 T +43 (0)7477 44288
 F +43 (0)7477 44588
 E office@rehatronik.at
 www.rehatronik.at
 www.pflegeruf.at