

Regia



Clinic | Care | **Homecare** | Assist

Das
Pflegebett
mit vielen Optionen



Erhältlich im
medizinischen Fachhandel



Regia mit verschiebbarer Seitensicherung
Titelseite: Regia mit teleskopierbarer Seitensicherung



1.



2.



3.



4.

Niedrigbett ↓ ↑	Großer Höhenverstellbereich 26 bis 80 cm ↑ ↓	Hohe sichere Arbeitslast 225 kg	Bettverlängerung ← →	Verfahrbarkeit ← →	24 Volt System ⚡	Fußtieflage ↙ ↘	Deutsche Ingenieurskunst ⚙️
---------------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche

Ein Pflegebett mit viel **Komfort und Sicherheit**, das die Mobilisierung der Bewohner fördert, sehr gut aussieht und das Budget schont – so lässt sich das neue Regia beschreiben. Mit diesem Modell erhalten **Privatkunden** ein Bett für hohe individuelle Ansprüche zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Regia eignet sich auch für **anspruchsvolle Seniorenresidenzen**.

Als **Niedrigbett** mit einem Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm leistet das Regia einen wesentlichen Beitrag zur Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) und ermöglicht zugleich der Pflegekraft ein ergonomisch günstiges Arbeiten auf

Hüfthöhe. Auch die beiden **geteilten Seitensicherungssysteme** fördern die Mobilität des Bewohners. Sowohl die serienmäßige teleskopierbare Seitensicherung als auch die optionale verschiebbare Seitensicherung lassen bei Bedarf ausreichend Raum für einen bequemen Ein- und Ausstieg. So folgt Burmeier der Philosophie des Werdenfeler Weges, auf FEM konsequent zu verzichten.

Das **elegante Design** des Bettes im Dekor Buche Natur trägt zu seiner hohen Wohnlichkeit bei. Weitere Dekore sind auf Anfrage lieferbar.

Geteilte Seitensicherungen für mehr Schutz und Mobilität

Pflegebedürftige Menschen haben in verschiedenen Situationen sehr unterschiedliche Schutzbedürfnisse. Für das Regia stehen 2 geteilte Seitensicherungen zur Auswahl, die sich präzise an individuelle Anforderungen anpassen lassen.

Die serienmäßige **teleskopierbare Seitensicherung (TSG)** lässt sich in 2 Stufen bequem nach oben ausziehen. Wird nur die kopfseitige Hälfte hochgezogen, bleibt dem Bewohner ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg (Bild 1). Beide Hälften lassen sich auch **diagonal** anstellen (Bild 2). Auf diese Weise vermittelt die Seitensicherung dem Bewohner ein Gefühl von Halt und ermöglicht ihm zu-

gleich einen ungehinderten Blick auf den Fernseher oder in den Garten.

Die optionale **verschiebbare Seitensicherung (VSG)** lässt ebenfalls bei Bedarf viel Raum für den Ein- und Ausstieg (Bild 3). Ihre stufenlos verstellbare Mittelstütze ist gleichzeitig eine praktische **Mobilisierungshilfe**, an der sich der Bewohner hochziehen oder stehend festhalten kann (Bild 4). Während der Pflege lässt sich die Mittelstütze zur Seite schieben. Die Pflegekraft gewinnt dadurch eine **weite freie Arbeitsfläche**.



Immer auf der richtigen Höhe

Niedrigbetten leisten in der Pflege einen wichtigen Beitrag zur **Vermeidung von Sturzverletzungen**. Aus einer Position dicht über dem Boden besteht für den Bewohner nur ein geringes Risiko, selbst wenn die Seitensicherung nicht angestellt ist. Gemäß der Philosophie des **Werdenfeller Weges** lassen sich freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) dadurch einfach vermeiden.

Mit seinem sehr weiten **Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm** wird das Regia allen Anforderungen in der Pflege gerecht. Die tiefste Position ist sehr niedrig und bietet dem Bewohner im Bett optimalen

Schutz (Bild 1). Mit dem Handschalter lässt sich das Bett einfach und intuitiv verstellen. Dank seiner **3-Stopp-Funktion** hält es automatisch bei einer mittleren Position von ca. 40 cm – der idealen Höhe für einen **bequemen Ein- und Ausstieg** (Bild 2). In der oberen Position von 80 cm bietet das Regia der Pflegekraft die Möglichkeit, ergonomisch günstig **auf Hüfthöhe zu arbeiten**. Das spart Kraft und schont den Rücken (Bild 3).

Durch seine individuellen Verstellmöglichkeiten fördert das Regia Mobilität und Gesundheit und erleichtert allen Beteiligten den Alltag wesentlich.




Komfortabel am Alltag teilnehmen

Viele pflegebedürftige Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Bett. Aus einer liegenden Position heraus ist es jedoch oft schwierig, am Alltagsgeschehen teilzunehmen.

Das Regia bietet durch seine **flexiblen Verstellmöglichkeiten** viele Optionen, um den Bewohnern wieder ein Leben auf Augenhöhe zu ermöglichen. Das Bett lässt sich mithilfe des Handschalters in eine **Fußtieflage von bis zu 15°** bringen. Kombiniert mit der bis zu **70° verstellbaren Rückenlehne** nimmt es dadurch eine komfortable Sitzposition ein. Pflegebedürftige Menschen können sich ohne An-

strengung aufrichten. Einem lebhaften Gespräch oder einem gemütlichen Fernsehabend steht nichts mehr im Weg. Auch das Essen ist in der sitzenden Position wesentlich einfacher.

Die elegant verkleideten Doppelaufrollen sorgen für eine **leichte Verfahrbarkeit**. Zugleich hat das Bett immer einen sicheren Stand – die Rollen lassen sich serienmäßig **paarweise** mit dem Fuß **brem-sen**. Optional ist auch eine **zentrale Rollenfeststellung** erhältlich.

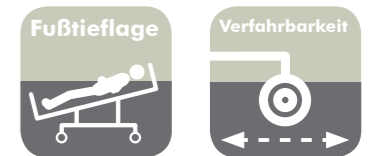



Zubehör

Mit einer großen Auswahl an Zubehör können die Kunden das Regia in ihr individuelles Wunschbett verwandeln. So benötigen großgewachsene Bewohner mehr Platz. Für das Regia ist daher eine **Bettverlängerung** lieferbar. Mit der teleskopierbaren Seitensicherung verlängert sich die Liegefläche dadurch auf 227 cm, mit der verschiebbaren Seitensicherung (Bild 1) auf 220 cm. Zur Verlängerung der Matratzen stehen passende **Polster** zur Verfügung.

Um den Bewohner vor Stoßverletzungen zu schützen und bei Bedarf den Raum zwischen den Holmen zu schließen, lässt sich die verschiebbare Seitensicherung mit **Schaumlederbezügen** verkleiden (Bild 2). Die **Bettzeugablage** ist beim Beziehen des Bettes

besonders praktisch (Bild 3). Vertikal und horizontal wirkende **Wandabweisrollen** schützen die Zimmereinrichtung und das Bett vor Kollisionen beim Verfahren und der Höhenverstellung (Bild 4).

In der Dunkelheit gibt die **Unterbettbeleuchtung** sichere Orientierung (Bild 5). Sie ist blendfrei und wird mit dem Handschalter aktiviert. Die **Komfortliegefläche** sorgt mit 50 freischwingenden Elementen für punktgenauen Liegekomfort, den man nicht mehr vermissen möchte (Bild 6). Sie ist auch nachträglich montierbar.

Ausstattungen und Optionen

Ausführung	Regia
Metall-Liegefläche	●
Komfort-Liegefläche	○
2 x 2-Rollenfeststellung	●
4-Rollen-Zentralfeststellung	○
DewertOkin 24 Volt	●
Kopf- und Fußteil Standard	●
Kopf- und Fußteil mit Rundstollen	○
Kopf- und Fußteil Prinzino	○
Kopf- und Fußteil Primus	○
Kopf- und Fußteil Primus-Low	○
Dekor Buche Natur	●
Dekore Königsahorn, Kirsche Edel, Kirsche Havanna	○
Aufrichter	○
teleskopierbare Seitensicherungen (TSG) beidseitig	●
verschiebbare Seitensicherungen (VSG) beidseitig	○
Unterbettbeleuchtung	○
Notabsenkung Batterie	●
mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	○
Schaumlederbezug (nur VSG)	○
Leseleuchte	○
Trendelenburg-Handschalter (nur für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen)	○
Bettverlängerung 27 cm (TSG), 20 cm (VSG), Polster Teile zur Matratzenverlängerung lieferbar	○
Bettzeugablage	○
Wandabweisrollen (2 Stück/4 Stück wahlweise)	○
Infusionshülse fußseitig	○
Außenmaße	100 x 210 cm
Bestellnummer	50.2025.12

● = Standard ○ = optional

Standardausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden, robusten Metall-Lamellen, Liegehöhenverstellung von 26 – 80 cm, alle Liegeflächenelemente durch Elektromotoren verstellbar, Fußtieflage bis 15° mit automatischer Einstellung der Autokontur zur Stabilisierung der Position des Bewohners
- Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung

- Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- vertikal teleskopierbare geteilte Seitensicherungen beidseitig
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Kopf- und Fußteil Standard im Dekor Buche Natur
- dezente Rollenverkleidung in eckiger Form



niedrigste Stellung der Liegefläche: 26 cm



höchste Stellung der Liegefläche: 80 cm



Orthopädische Lagerung: Unterschenkellehne um 21 cm anhebbar



Fowler-Position




Fußtieflage bis zu 15°



Trendelenburg-Position bis zu 15° (nur für Pflegeeinrichtungen)



Standard

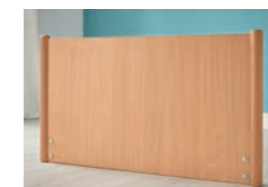

Mit Rundstollen




Prinzino



Primus, Primus-Low



Diese Broschüre wurde komplett auf FSC®-Papier (Forest Stewardship Council®) mit ökologischen Farben und Lacken gedruckt. Das verwendete Material stammt aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften.

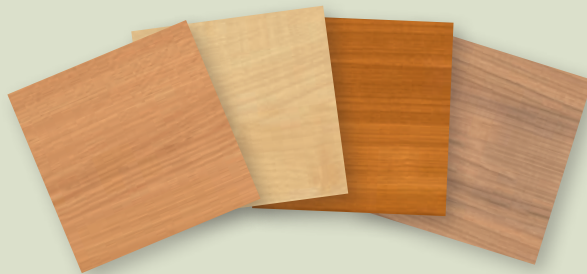

Wählen Sie für das Regia zwischen 4 wohnlichen Dekoren.



REHATRONIK
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

