

Arminia III 24 Volt




Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das praktische Pflegebett

Arminia III 24 Volt - Das praktische Pflegebett im wohnlichen Design

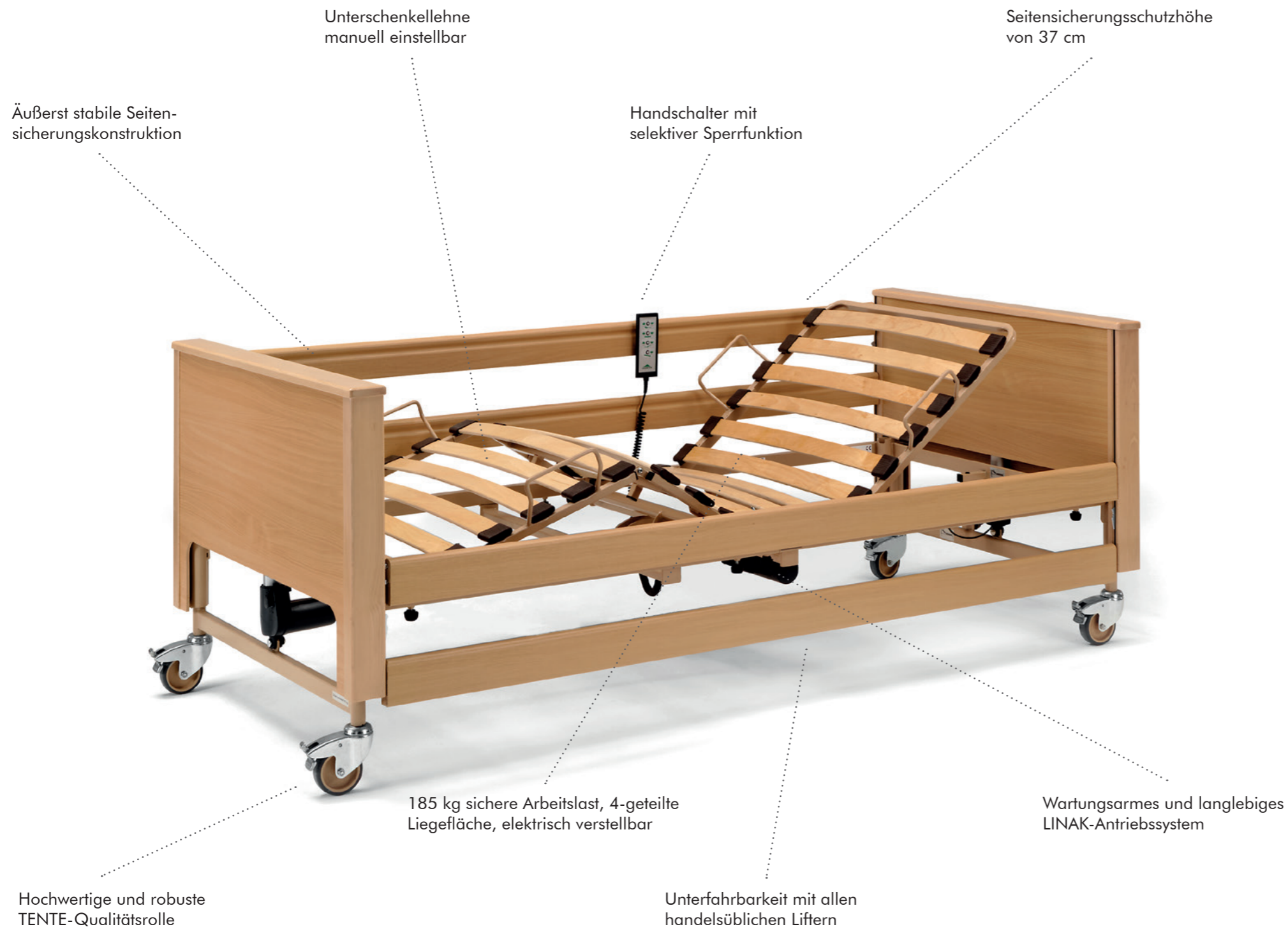

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Arminia III 24 Volt“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Der Holzbau vermittelt ein wohnliches Ambiente. Ein Bett, in dem sich der Bewohner sehr wohl fühlt.

Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Seitensicherungsschutzhöhe von 37 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 15 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

Details



Fußtieflagerung



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

Pflegebett **Arminia III 24 Volt**

Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilhauben in Buche Dekor/Buche massiv
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2016, Version 6, Artikel-Nr. 600632.

Zubehör

(gegen Mehrpreis
lieferbar)



Adaptierbare Seitensicherung



Liegefläche mit Metallstreben



Serviertablett



Bettverlängerung inkl.
Seitensicherungsholme
(auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Links: aufsteckbarer Seiten-
sicherungsholm
Rechts: drehbarer Handlauf



Schaumlederbezug

Bestellnummern und Außenmaße

51.3424.33 S Pflegebett **Arminia III 24 Volt**, Länge 220 cm, Breite 101 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

REHATRONIK
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com


BURMEIER
Stieglmeyer-Gruppe